


## PGBKT7-GW 质粒说明书

### ● 产品规格内容 (CAT#: PS3093)

PGBKT7-GW 质粒	150 $\mu$ l /1 支	>50ng/ $\mu$ l	-20 度保存/大于 10 年
DB3.1(含 PGBKT7-GW 质粒)甘油菌种	400 $\mu$ l /1 支	—	-80 度保存/大于 10 年

### ● 质粒图谱与基础信息

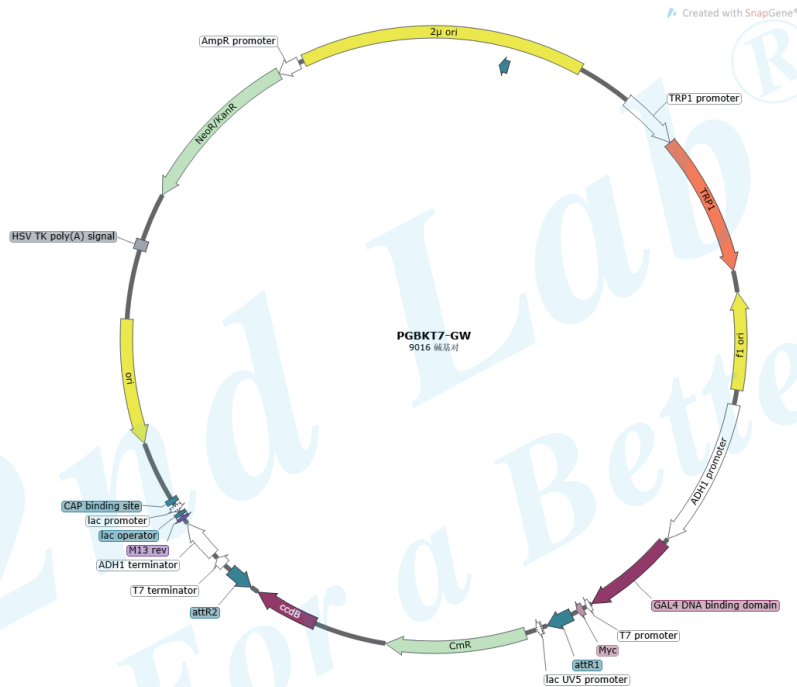

质粒名称	PGBKT7-GW	质粒大小	9016bp
宿主	酵母	质粒类型	酵母 gateway 质粒
大肠中质粒复制子	ColE1/高拷贝	宿主中质粒复制子	yeast 2 $\mu$
大肠中抗性	Kan 硫酸卡那霉素 50ug/ml	宿主中筛选标记	TRP/色氨酸缺陷/SD/-TRP

### ● 产品说明

1, 本公司质粒均为质粒大提试剂盒提取质粒, 因不同质粒的复制子不同, 质粒浓度有差异, 收到质粒后可直接酶切用于构建载体。

2, 随质粒同时提供一管含有质粒的 DB3.1 甘油菌种, 收到菌种后可直接放-80 度长期保存, 也可用交叉划线法划线后挑单菌落接菌, 大量扩繁质粒。DB3.1 大肠杆菌菌株基因组中含有 *gyrA462* 基因, 赋予其对 *ccdB* 毒性基因的抗性, 特别适用于构建或扩繁含有 *ccdB* 基因的质粒载体 (例 GATEWAY System vector)。

3, 质粒序列可在产品页面下载 *snappgene* 文件或 *text* 文件。

#### ● 注意事项

- 1, 收到含有质粒的菌株应立即放-80 度, 不可放-20 度保存; 在 4 度或室温长时间存放会增加发生错误突变的概率。
- 2, 质粒在不同实验室保存的过程中有发生突变的概率, 所以实际的测序结果与数据库下载序列可能会有部分序列存在 SNP 或突变, 只要不在核心元件发生突变或不影响质粒核心功能, 一般不影响使用。

2nd Lab<sup>®</sup>  
For a Better Lab