


pDEST32 质粒说明书

● 产品规格内容 (CAT#: PS3090)

pDEST32 质粒	150µl / 1 支	>50ng/ul	-20 度保存/大于 10 年
DB3.1(含 pDEST32 质粒)甘油菌种	400µl / 1 支	—	-80 度保存/大于 10 年

● 质粒图谱与基础信息

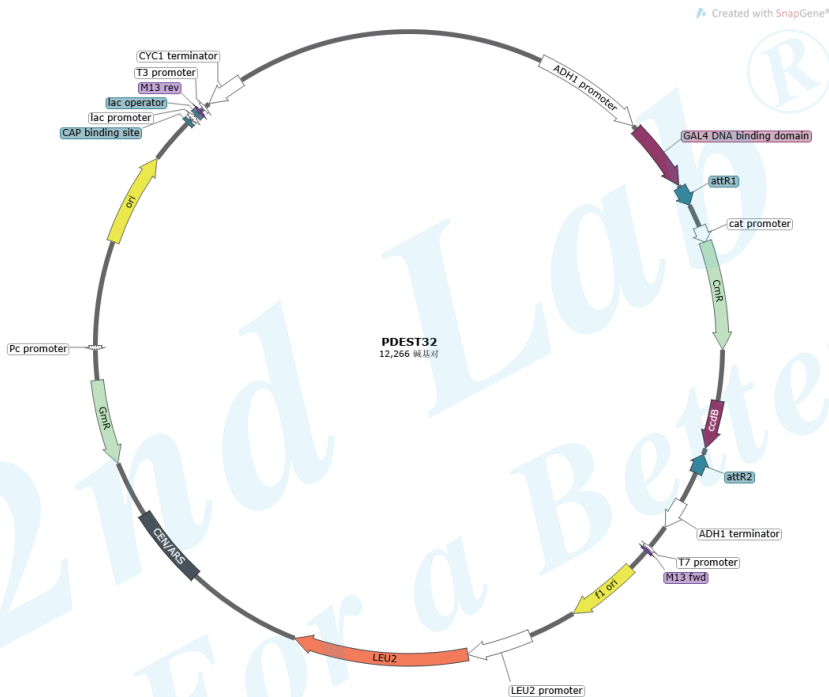

质粒名称	pDEST32	质粒大小	12266bp
宿主	酵母	质粒类型	酵母双杂用质粒
大肠中质粒复制子	ColEI/高拷贝	宿主中质粒复制子	CEN/ARS
大肠中抗性	Gent 硫酸庆大霉素 50ug/ml	宿主中筛选标记	LEU/亮氨酸缺陷/SD/-LEU

● 产品说明

1, 本公司质粒均为质粒大提试剂盒提取质粒, 因不同质粒的复制子不同, 质粒浓度有差异, 收到质粒后可直接酶切用于构建载体。

2, 随质粒同时提供一管含有质粒的 DB3.1 甘油菌种, 收到菌种后可直接放-80 度长期保存, 也可用交叉划线法划线后挑单菌落接菌, 大量扩繁质粒。DB3.1 大肠杆菌菌株基因组中含有 *gyrA462* 基因, 赋予其对 *ccdB* 毒性基因的抗性, 特别适用于构建或扩繁含有 *ccdB* 基因的质粒载体 (例 GATEWAY System vector)。

3, 质粒序列可在产品页面下载 *snppgene* 文件或 *text* 文件。

● 注意事项

1, 收到含有质粒的菌株应立即放-80 度, 不可放-20 度保存; 在 4 度或室温长时间存放会增加发生错误突变的概率。

2, 质粒在不同实验室保存的过程中有发生突变的概率, 所以实际的测序结果与数据库下载序列可能会有部分序列存在 SNP 或突变, 只要不在核心元件发生突变或不影响质粒核心功能, 一般不影响使用。

2nd Lab[®]
For a Better Lab